


Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System

passend zu **Corail®** (DePuy Synthes)

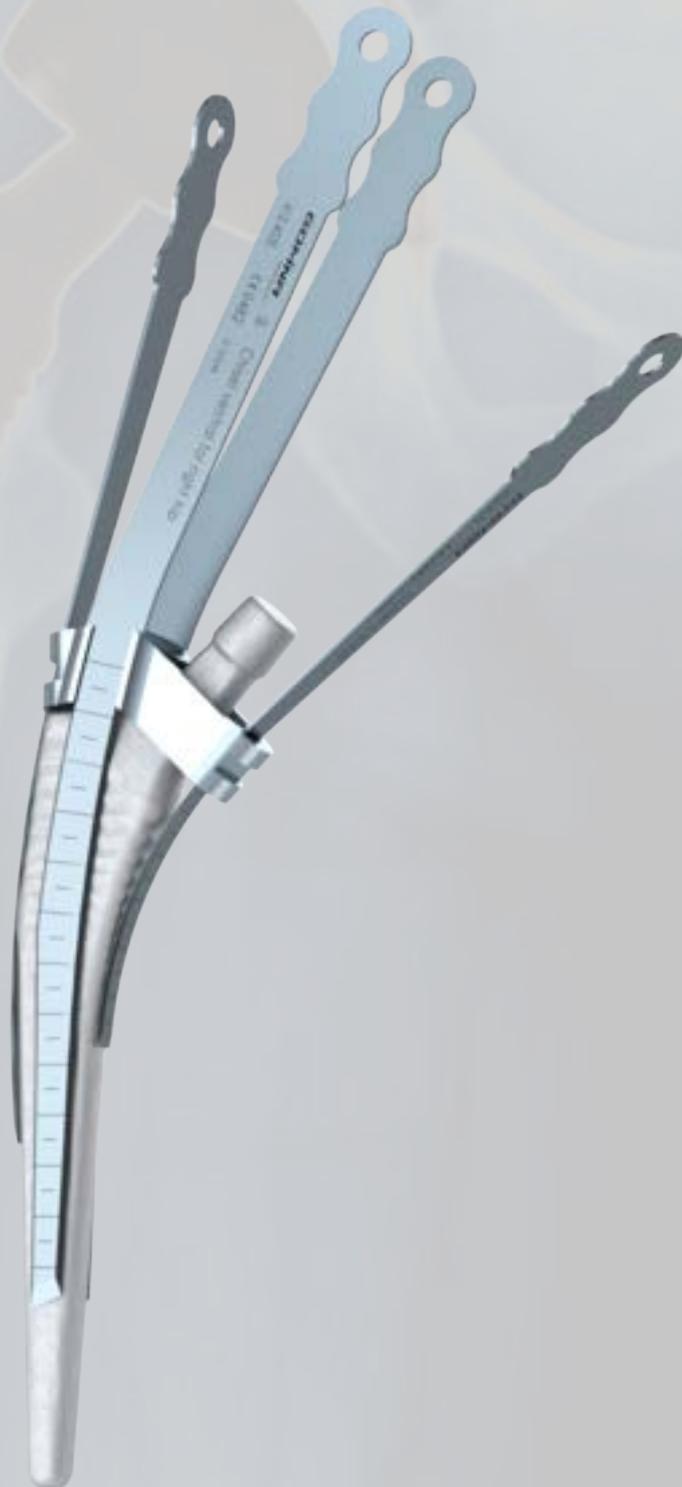

Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert.

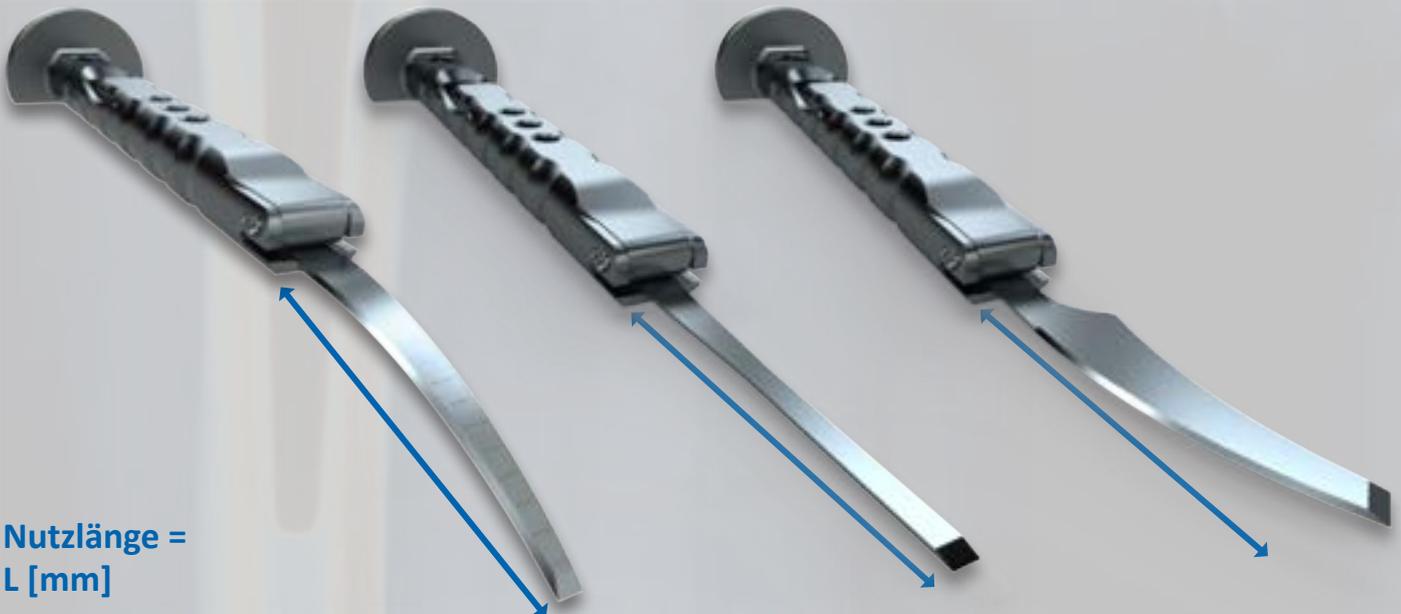


Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsschlitze

Führungsrillen

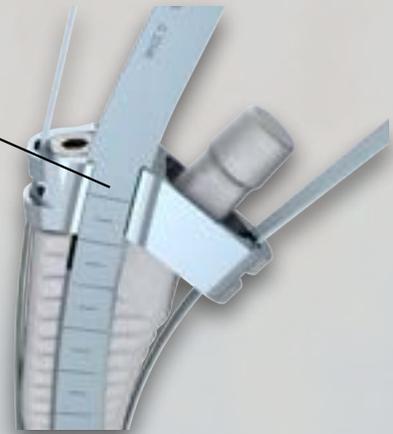

Die schablonengeführten Meißel sind auf die Führungsschlitze der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meißel werden durch beide Führungsschlitze (bzw. Rillen) geführt bis die Meißelklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meißel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.


Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit der Fixierschraube befestigt.



Die Schablone muss in lateral-medialer Richtung korrekt auf dem Schaft positioniert werden, bevor sie mithilfe der Schraube fixiert wird. Als Referenz wird der laterale Führungsschlitz verwendet.

Übersicht Meissel mit Schablone

**Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.*

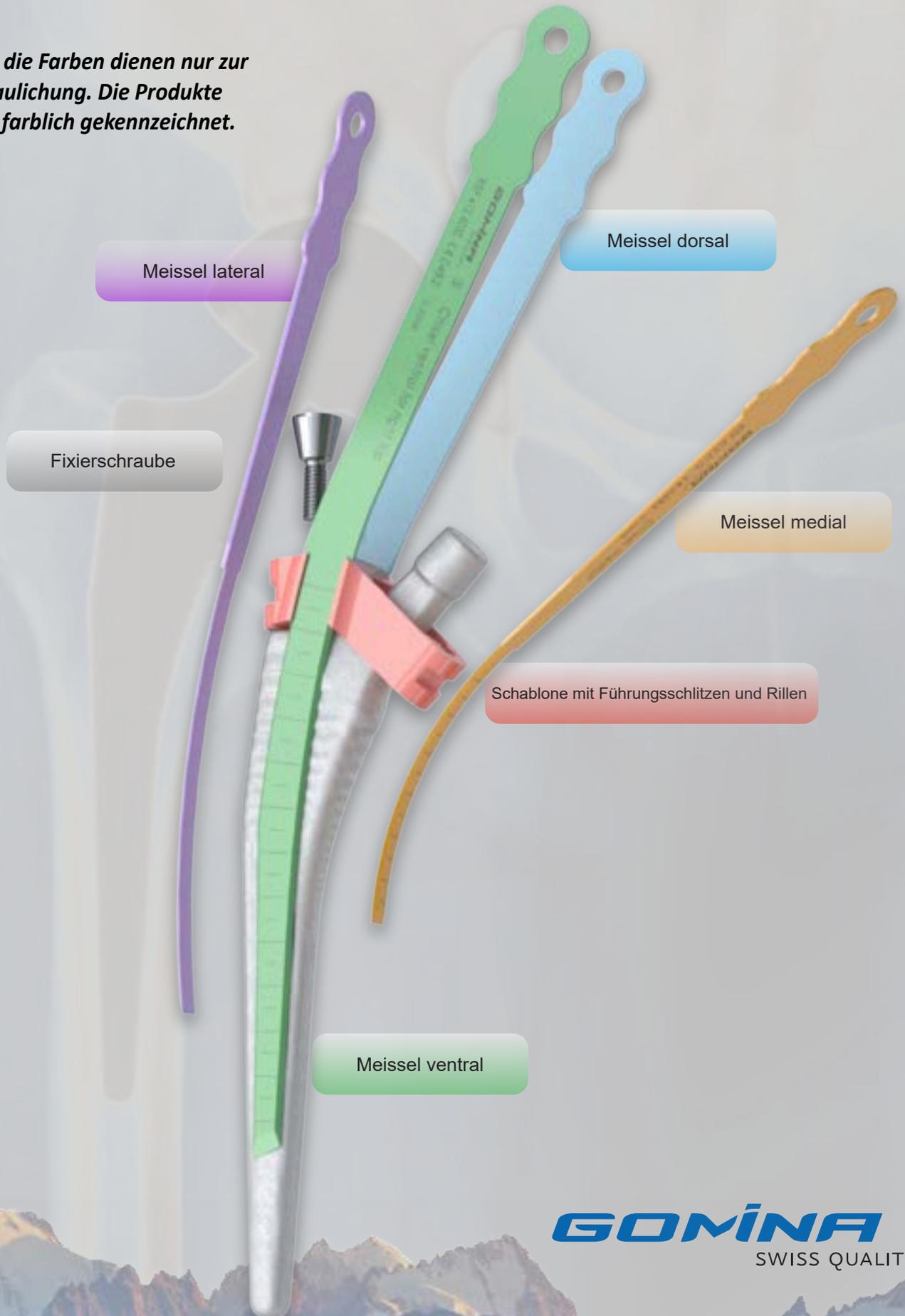

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen 08, 09, 10



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 412.201S | Meissel lateral | 133.0 | 4.8 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 412.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|
| 412.401S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|
| 412.402S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



| | |
|----------------|-----------|
| 412.901 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.102 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.104 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **11, 12, 13**



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 412.202S | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 412.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.403S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.404S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



| | |
|----------------|-----------|
| 412.903 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.102 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.104 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen 14, 15, 16



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 412.202S | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 412.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.405S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 215.3 | 7.4 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| 412.406S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 215.3 | 7.4 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



| | |
|----------------|-----------|
| 412.905 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.102 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.104 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen 18, 20



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| 412.202S | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| 412.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|
| 412.407S | Meissel ventral für rechte Hüfte | 233.5 | 9.7 | 1.19 |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----|------|



| | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|
| 412.408S | Meissel dorsal für rechte Hüfte | 233.5 | 9.7 | 1.19 |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



| | |
|----------------|-----------|
| 412.907 | Schablone |
|----------------|-----------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.102 | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



| | |
|----------------|----------------|
| 400.104 | Inbusschlüssel |
|----------------|----------------|

Gesamtübersicht Artikelnummer

| | Corail® Schaftgrößen | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---|-------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|  | Alle | 400.001 | Handgriff inkl. Ausschlagbolzen | | | |
| | Alle | 400.100 | Ausschlagbolzen (Ersatzteil) | | | |
|  | 08/09/10 | 412.201S | Meissel lateral | 133.0 | 4.8 | 1.19 |
| | 11/12/13/14/15/16/18/20 | 412.202S | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
|  | All sizes | 412.211S | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|  | 08/09/10 | 412.401S | Meissel ventral rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
| | 08/09/10 | 412.402S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
| | 11/12/13 | 412.403S | Meissel ventral rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
| | 11/12/13 | 412.404S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
| | 14/15/16 | 412.405S | Meissel ventral rechte Hüfte | 215.3 | 7.4 | 1.19 |
| | 14/15/16 | 412.406S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 215.3 | 7.4 | 1.19 |
| | 18/20 | 412.407S | Meissel ventral rechte Hüfte | 233.5 | 9.7 | 1.19 |
| | 18/20 | 412.408S | Meissel dorsal rechte Hüfte | 233.5 | 9.7 | 1.19 |
|  | 08/09/10 | 412.901 | Schablone | | | |
| | 11/12/13 | 412.903 | Schablone | | | |
| | 14/15/16 | 412.905 | Schablone | | | |
| | 18/20 | 412.907 | Schablone | | | |
|  | All sizes | 400.102 | Fixierschraube | | | |
|  | All sizes | 400.104 | Inbusschlüssel | | | |

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
info@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2024-03

Zuletzt aktualisiert: 31.03.2024

Offizieller Distributor für Deutschland:

cumos GmbH

Hexentalstraße 4

79249 Merzhausen

Tel. +49 761 8885704-0

Fax +49 761 8885704-9

info@cumos.de

www.cumos.de

cumos® PRECISE
MEDICAL
DEVICES

GOMINA
SWISS QUALITY